



Riempire una cartuccia Mastatest®




Preleva un campione di latte in condizioni di asepsi

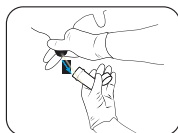


Indossa guanti puliti ed estrai la cartuccia dalla confezione

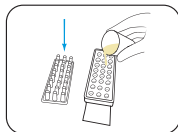


Togli il coperchio della cartuccia e versa il latte fino al bordo

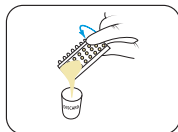


Rimuovi il latte dalla cartuccia

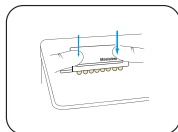

Rimetti il coperchio premendo con forza, e scrivi sul coperchio i dettagli del campione

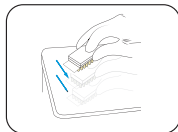

Batti la cartuccia sul piano con decisione 2-3 volte, e ripeti se osservi bolle d'aria nei pozzetti

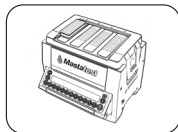

Inserisci la cartuccia nel Lapbox™ con le frecce rivolte verso la parte posteriore, poi rimetti il coperchio



vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Avviare un Mastatest®

Per iniziare:

- Dal menu principale del Lapbox, seleziona **Start Mastatest**
- Seleziona la postazione di Lapbox utilizzata: se è stata utilizzata la prima postazione premi
- Scorri con la freccia per selezionare la prima postazione libera e premi

Opzione 1: BoxStart

- Seleziona il tipo di test:
 - Per Clinical
 - Per HiSCC
- Seleziona **BoxStart**
- Inserisci il numero della vacca (ad esempio 00123) e scorri la freccia per selezionare il quarto, poi premi
- Conferma l'avvio premendo di nuovo

Opzione 2: QuickStart

- Scorri verso il basso per selezionare il tipo di test:
 - Per Clinical scorri la freccia sino a **QuickCM**
 - Per HiSCC scorri la freccia sino a **QuickSCC**
- Inserisci i dettagli del test su vetoquinol.mastatestsystem.com entro 21 ore

Passaggi successivi:

- Il timer per il conto alla rovescia mostra il tempo rimanente.
- I risultati vengono inviati tramite e-mail entro 24 ore
- È possibile avviare altri test indipendentemente

